



New

VET ES8 超音波測孕器



適用動物



懸掛式佩戴



手臂式佩戴



5.7"高解析度液晶顯示器



180分鐘
大容量電池



波克生醫股份有限公司

測孕 · 背脂測量 · 瘦肉率

VET ES8 超音波測孕器

主要功能


- **手臂式設計**
體積小，重量輕，易於攜帶，方便出診。
- **四種方式：手臂式、懸掛式、桌面式、戶外遮陽式**
給使用者全新的使用體驗。
- **採用5.7吋高解析度彩色液晶顯示器**
高亮度、高對比度、寬視角，影像細膩。
- **懷孕測量：豬、羊的懷孕週數及預產期。**
- **背脂測量：可手動標記或開啟自動背脂測量功能**
· 測得厚度顯示在螢幕右側。
- **豬瘦肉率測量**
透過測量背脂厚度及腰眼深度計算瘦肉率。
- **隨身碟儲存功能(支援高速USB與大容量)**，隨身碟
抓取資料後，接上印表機(支援彩色雷射)可直接
列印各種圖片和報告，讓診斷輸出更方便簡單。
- **可永久儲存：256張，影片回放(重播)：245幀。**
- **影像可切換8種顏色(含黑白)。**
- **防濺水、防塵、獨特的散熱窗設計。**
- **可選配滑鼠操作，輔助標記、繪製操作更順手。**



產品規格

- 掃描深度：256mm
- 探頭型式：電子凸陣
- 影像模式：B 模式
- 顯示模式：B、2B、4B、B/M、M五種
- 灰階：256級
- 電池續航力：3~4小時
- 尺寸 (cm)：本體 15.5 x 18 x 高8.2
探頭 10.7 x 7.4 x 厚2.5，線長200
- 重量 (g)：本體 985，探頭 365

圖像顯示

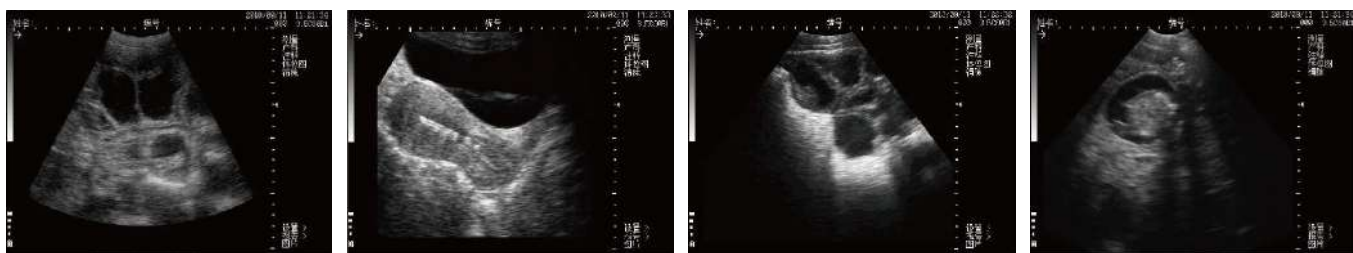

※文宣品顯示內容及規格波克生醫皆保有隨時修改之權利，如有任何變更恕不另行通知。

